

•自学之友•

doi: 10.3866/PKU.DXHX201905031

www.dxhx.pku.edu.cn

面向分析化学教学的数理统计软件的开发和应用

邵利民*

中国科学技术大学化学系，合肥 230026

摘要：针对分析化学教材中统计数值表不够全面、抽象难懂的不足，开发了基于 Matlab 和 Android 平台的数理统计软件。该软件具有简洁的界面、直观的图像和自然的人机交互等优点，提供数理统计应用中的概率计算和统计检验所需的临界值，分布类型包括正态分布、 t 分布、 χ^2 分布和 F 分布。该软件旨在辅助分析化学师生提高解题效率，从而将学习重点集中在数理统计知识的深入理解和结果的合理阐释；也为此后专业统计软件的使用提供平稳过渡。本文介绍了该软件的主要特点，结合例题详细说明了软件的使用方法。

关键词：数理统计；软件开发；Matlab；安卓

中图分类号：G64; O6

Developing a Software Package for Statistical Applications in the Course of Chemical Analysis

Limin Shao*

Department of Chemistry, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, P. R. China.

Abstract: A statistical software package is developed for the course of chemical analysis. The software calculates cumulative distribution functions and inverse cumulative distribution functions of normal, t , χ^2 , and F distributions; it also provides critical values for tests of statistical significance. The software is designed to substitute for traditional data tables that are insufficient and obscure. Statistical problems can be solved more efficiently with the software than with traditional data tables, which enables students to focus on understanding statistical principles and interpreting results. The software provides information through an intuitive interface, a graph, and natural interactions. Both Matlab and Android versions are presented, and free of charge.

Key Words: Mathematical statistics; Software development; Matlab; Android

数理统计应用是高校分析化学课程的重要内容，也是课程特色。应用数理统计，不仅可以在更高层次上阐释分析结果，而且可以进一步发掘信息。正因为如此，理工农医类的分析化学教材都会包含数理统计应用方面的知识^[1–8]。

分析化学传统课程体系中，数理统计应用的模式为：计算→查表→结论。其中“查表”是指在统计数值表中查找所需数值。限于篇幅，教材中的统计数值表只能列出常用数值，因此在应用中存在一定限制。下面以 t 分布和 F 分布为例进行说明。

教材[1,2,7]中的 t 分布表列出置信度分别为 90%、95% 和 99% 的临界值，而且是“双边值”。这种“双边值”可以直接用于计算置信区间或者进行双侧 t 检验；也可以用于单侧 t 检验，但是置信

收稿：2019-05-09；录用：2019-05-16；网络发表：2019-06-03

*通讯作者，Email: lshao@ustc.edu.cn

基金资助：安徽省重点教学研究项目(017jyxm0028)

度变为 95%、97.5% 和 99.5%。显然，如果在其他置信度下进行 t 检验，这些统计数值表不再适用。教材[8]的 t 分布表增加了 98% 和 99.9% 两个置信度，但是限制仍然存在。

教材[1,2,7,8]中的 F 分布表列出置信度为 95% 的临界值，而且是“单边值”。这种“单边值”可以直接用于单侧 F 检验；也可以用于双侧 F 检验，但是置信度变为 90%。显然，如果在其他置信度下进行 F 检验，这些统计数值表不再适用。

统计数值表实际上是累积分布函数(cumulative distribution function, CDF)和逆累积分布函数(inverse cumulative distribution function, ICDF)的计算结果^[3]，然而相关计算对于简单计算器来说过于复杂。所以，统计分布表尽管存在限制，使用起来也不太方便(表的形式有很多种，为了区别，一般在表头绘有示意图)，但是在计算工具欠发达年代必不可少。

当前计算机技术高度发展，硬件普及、软件丰富，可以方便高效地计算累积分布函数和逆累积分布函数。例如，相当普及的 Excel 软件就能够计算常见统计函数(在“插入函数”对话框中的“统计”类别中)，更不必说专业统计软件(用户输入原始数据，即可得到结果)。实际上，当前数理统计应用已经不再依赖统计数值表。

专业统计软件尽管方便，但是这种“黑箱”模式并不适用于旨在理解概念、掌握原理的教学活动中。非专业统计软件(如 Excel 或者教材[3]中提供的 Matlab 程序)，虽然可以完成有关计算，但是没有结合图像，致使本来就很抽象的统计知识更难理解。针对这些问题，我们开发了名为 Statistical Tool for Analytical Chemistry (stac) 的软件，发布了 Matlab 和 Android 两个版本，分别运行于 PC 机和智能手机。

stac 软件能够计算正态分布、 t 分布、 χ^2 分布和 F 分布的累积分布函数和逆累积分布函数；提供显著性检验所需要的临界值(即替代传统的统计数值表)，计算显著性检验的 P -值(为专业统计软件广泛采用)，并提供图像以帮助学生加深理解数理统计知识。这些功能设定与软件服务与教学的目的相一致，只起辅助作用，计算主体仍然是学生。

1 软件介绍

在 Matlab 环境下开发 stac 软件。软件从底层设计，仅使用 Matlab 基本运行环境和基础库函数，不需要任何可选工具箱(Toolbox)中的函数，用户因此不必另外购买任何 Matlab 工具箱。软件保留版权，非商业使用免费。

1.1 软件安装

用户从 <http://staff.ustc.edu.cn/~lshao/misc.html> 下载 stac 软件安装程序。安装程序是一个 zip 压缩包，通过解压即可完成安装；软件可以安装在任意文件夹，但是其文件操作权限可能受限(如果权限不够，软件给出提示和解决方法)。为了避免权限方面的麻烦，建议将软件安装在当前用户的桌面。

上述文件操作权限是指软件 stac 在自身文件夹中创建和删除数据文件，不会对其他文件进行操作。

stac 要求 Matlab 的最低版本是 7.10.0.499 (R2010a)。如果 Matlab 版本太低，软件会给出相应提示。

软件安装成功后，需要在 Matlab 中输入相应命令来运行。运行方式在 The First Running.pdf 中有详细说明。这种略显繁琐的手动运行方式仅需一次。首次运行时，stac 会提示用户创建快捷方式。此后用户通过点击快捷方式按钮，即可方便地运行该软件。

我们还开发了该软件的 Android 版本，用户通过智能手机扫描上述网页上的二维码下载 apk 文件，然后安装使用。

1.2 软件使用

软件的主界面如图 1 所示。主界面划分为三个功能区，上部功能区是各种计算模式；左侧功能区显示概率密度函数的图像；右侧功能区计算不同分布的累积分布函数、逆累积分布函数，或者计算显著性检验所需的临界值。

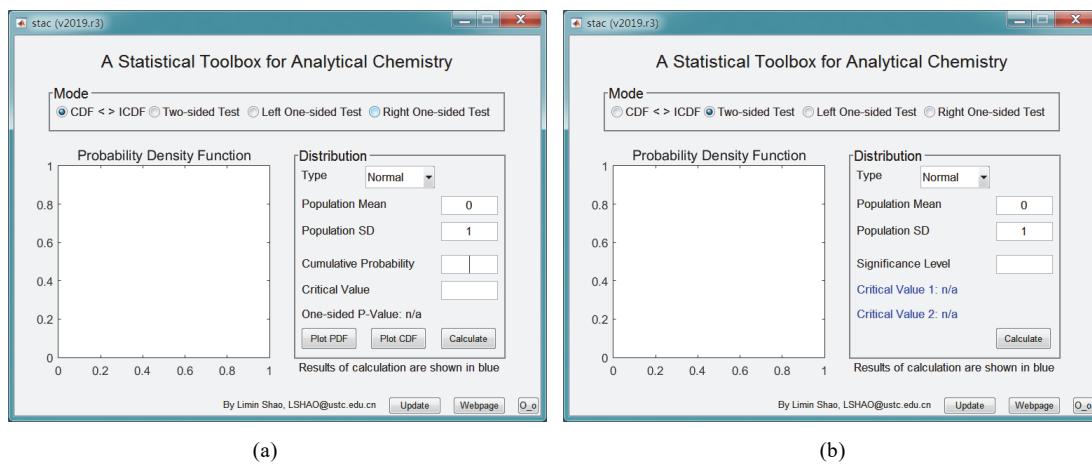


图 1 基于 Matlab 开发的统计工具软件 stac

(a) 计算累积分布函数(CDF)和逆累积分布函数(ICDF)时的界面; (b) 计算显著性检验临界值时的界面

stac 的主要功能分为两类: ① 计算累积分布函数(CDF)和逆累积分布函数(ICDF); ② 计算显著性检验所需的临界值。第一类功能的界面如图 1a 所示, 用户在 Mode 功能区选择 “CDF <> ICDF” 即可开始计算; 第二类功能的界面如图 1b 所示, 用户在 Mode 功能区选择 “Two-sided Text” “Left One-sided Test” 和 “Right One-sided Test” 其中一个即可开始计算, 这 3 种模式分别用于计算双侧检验、左侧单侧检验和右侧单侧检验的临界值。

在 “CDF <> ICDF” 计算模式下, 用户先从 Type 下拉列表中选择分布类型, 并输入该分布的参数。计算临界值时, 在 Cumulative Probability 编辑框输入累积概率, 回车或者单击 Calculate 按钮, 结果显示在 Critical Value 编辑框中; 计算累积概率时, 则在 Critical Value 编辑框输入临界值, 结果显示在 Cumulative Probability 编辑框中。坐标系显示相应的概率密度曲线, 并以阴影部分面积表示(输入的或者计算出的)累积概率。如果在 Critical Value 编辑框输入检验统计量的取值, 软件还计算单侧检验的 P -值, 双侧检验的 P -值(是单侧检验 P -值的 2 倍)通过文本 One-sided P-Value 的提示信息给出。所以, 这种计算模式也可用于显著性检验, 具体用法参见例题。

在另外 3 种计算模式下, 用户也是首先确定分布类型、输入相应参数。然后, 在 Significance Level 编辑框输入显著性水平, 回车或者单击 Calculate 按钮就可以计算出显著性检验所需的临界值; 坐标系显示相应的概率密度曲线, 并以阴影部分面积表示显著性水平。

按钮 “Update” 和 “Webpage” 分别用于查询新版本和访问软件主页。如果发现新版本, 在得到用户允许后, 软件会自动完成更新。


2 软件应用

下面通过分析化学课程中的一些常见例题, 介绍 stac 软件在数理统计问题中的应用。

2.1 概率相关计算

例 1 已知测量结果服从正态分布 $N(20.02, 0.11^2)$, 计算测量值落入 $[19.80, 20.20]$ 的概率。

解: $N(20.02, 0.11^2)$ 的概率密度函数示意图如下:

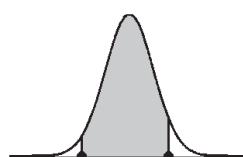

图中两个端点分别是 19.80 和 20.20，阴影部分面积就是测量值落入[19.80, 20.20]的概率。通过 stac 软件计算这一概率。

如图 2a 所示，在软件中选择“CDF <> ICDF”计算模式，从 Type 下拉列表中选择 Normal，在 Population Mean 和 Population SD 编辑框分别输入 20.02 和 0.11；在 Critical Value 编辑框输入 19.80，回车或者单击 Calculate 按钮，软件显示累积概率为 0.02275。如图 2b 所示，在 Critical Value 编辑框输入 20.20，回车或者单击 Calculate 按钮，软件显示累积概率为 0.94912。所以，所求概率为 0.94912 - 0.02275 = 0.93。

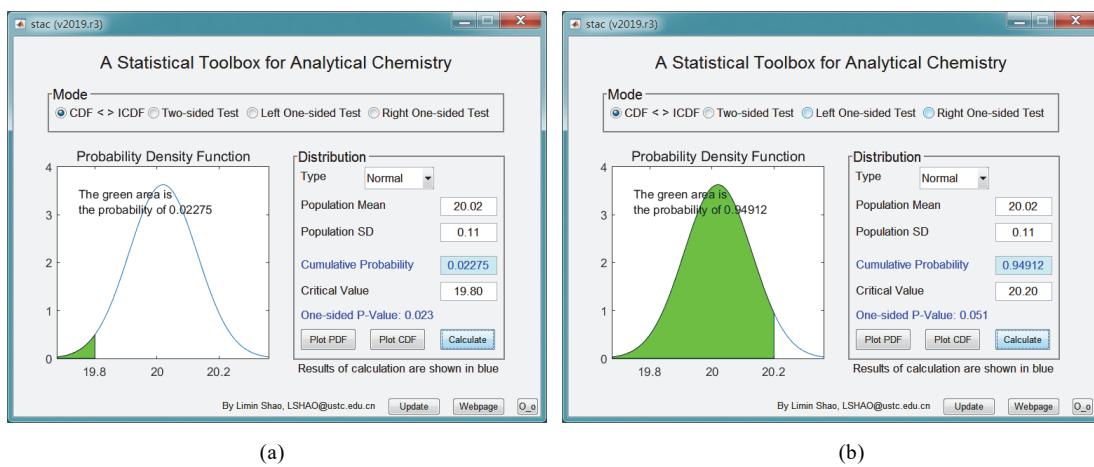


图 2 stac 软件计算正态分布累积概率时的界面

(a) 临界值为 19.80; (b) 临界值为 20.20

2.2 置信区间计算

分析化学中，置信区间通常指双侧置信区间，计算所需要的临界值就是双侧检验中的临界值，所以在软件中选择“Two-sided Test”计算模式。如果计算单侧置信区间，那么根据具体问题选择“Left One-sided Test”或者“Right One-sided Test”模式。

例 2 相同条件下的 10 次测量值：7.5, 7.4, 7.7, 7.6, 7.5, 7.6, 7.6, 7.5, 7.6, 7.6。计算 95%置信度下平均值的置信区间。

解：总体方差未知，所以使用 t 分布，置信区间的计算式如下：

$$\left[\bar{x} - \frac{st_{\alpha/2,f}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{st_{\alpha/2,f}}{\sqrt{n}} \right]$$


95%置信度对应的显著性水平为 0.05。本题计算的是双侧置信区间，所以在 stac 软件中选择“Two-sided Test”计算模式。从 Type 下拉列表中选择 t，然后在 Degrees of Freedom 编辑框输入 9，回车或者单击 Calculate 按钮，软件显示临界值为 2.26，即 $t_{0.025,9} = 2.26$ 。软件运行界面如图 3 所示。将 $t_{0.025,9}$ 代入上式后计算出置信区间为[7.5, 7.6]。

2.3 右侧单侧检验

例 3 一新建分析实验室按照测试标准，对标样进行了 9 次分析，标准偏差为 0.07。该测试标准规定，标样分析结果的标准偏差不得超过 0.05。在 0.05 显著性水平下，能否认为该实验室结果的标准偏差显著偏大？


解：根据问题描述，使用 χ^2 检验，属于右侧单侧检验。先计算检验统计量的取值：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = 15.7$$

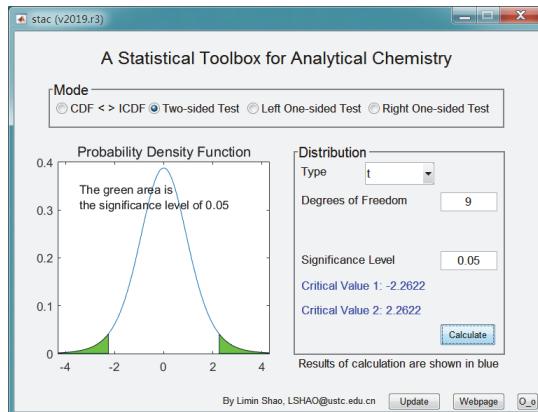图 3 stac 软件计算 t 分布临界值时的界面

然后计算临界值 $\chi^2_{0.05,8}$ 。如图 4a 所示，选择“Right One-sided Test”计算模式，从 Type 下拉列表中选择 Chi2，在 Degrees of Freedom 编辑框输入 8；在 Significance Level 编辑框输入 0.05，回车或者单击 Calculate 按钮，软件显示临界值为 15.5073。检验统计量的取值 15.7 超出临界值 $\chi^2_{0.05,8} = 15.5073$ (落入图 4a 中的阴影区)，所以该实验室结果的标准偏差显著偏大，该结论的可靠性为 95%。

该题也可以通过 P -值完成检验。如图 4b 所示，在软件中选择“CDF <> ICDF”计算模式，从 Type 下拉列表中选择 Chi2，在 Degrees of Freedom 编辑框输入 8；在 Critical Value 编辑框输入检验统计量取值 15.7，回车或者单击 Calculate 按钮，软件显示单侧检验的 P -值为 0.047 (软件还计算出累积概率，不过这里不需要)，小于显著性水平 0.05，所以该实验室结果的标准偏差显著偏大。

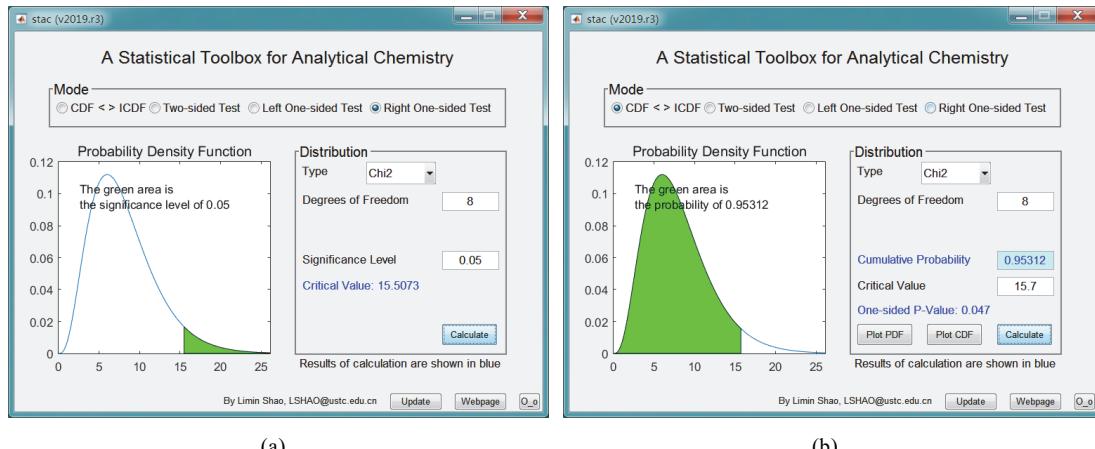图 4 stac 软件用于 χ^2 检验时两种检验方式的界面

(a) 计算右侧单侧检验的临界值；(b) 计算 P -值

2.4 左侧单侧检验

例 4 某分析人员连续两天使用同一方法分析同一样品，结果如下：

第一天	9.56	9.56	9.60	9.57	9.58	9.62
第二天	9.33	9.51	9.49	9.51	9.49	9.34

在 95% 置信度下，第一天数据的精密度是否显著优于第二天数据的精密度？

解：本题是判断第一天数据的样本方差是否显著小于第二天数据的样本方差，使用 F 检验，属于左侧单侧检验，95% 置信度对应 0.05 显著性水平。先计算检验统计量的取值：

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 0.079$$

然后计算临界值 $F_{0.95,5,5}$ 。如图 5a 所示, 选择“Left One-sided Test”计算模式, 从 Type 下拉列表中选择 F, 在 1st Degrees of Freedom 和 2nd Degrees of Freedom 编辑框均输入 5; 在 Significance Level 编辑框输入 0.05, 回车或者单击 Calculate 按钮, 软件显示临界值为 0.19801。检验统计量的取值 0.079 超出临界值 $F_{0.95,5,5} = 0.19801$ (落入图 5a 中的阴影区), 所以第一天数据的样本方差显著小于第二天数据的样本方差, 即第一天数据的精密度显著优于第二天, 该结论的可靠性为 95%。

该题也可以通过 P -值完成检验。如图 5b 所示, 在软件中选择“CDF <> ICDF”计算模式, 从 Type 下拉列表中选择 F, 在 1st Degrees of Freedom 和 2nd Degrees of Freedom 编辑框均输入 5; 在 Critical Value 编辑框输入检验统计量取值 0.079, 回车或者单击 Calculate 按钮, 软件显示单侧检验的 P -值为 0.0073 (软件还计算出累积概率, 不过这里不需要), 小于显著性水平 0.05, 所以第一天数据的样本方差显著小于第二天数据的样本方差。

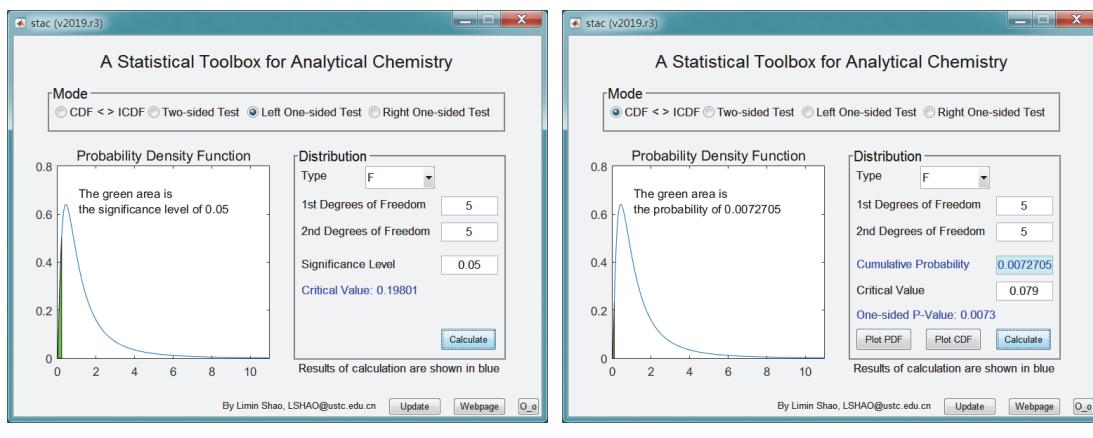


图 5 stac 软件用于 F 检验时两种检验方式的界面

(a) 计算左侧单侧检验的临界值; (b) 计算 P -值

值得指出的是, 传统教材中的 F 检验统计量定义为“大方差除以小方差”。目的是将左侧单侧检验等效转化为右侧单侧检验, 这样只需要提供一个右侧单侧检验的统计数值表。 F 分布的性质允许这种等效转化^[3], χ^2 检验分布没有这种性质, 所以传统教材中的 χ^2 统计数值表有两个, 分别用于左侧单侧检验和右侧单侧检验。使用 stac 软件, 可以避免这些问题, 而且提供图形, 直观且便于理解。

2.5 双侧检验

例 5 设计了一种测 Zn 的新方法。通过该方法测定锌含量为 34.33% 的标准合金试样, 5 次测定结果为 34.38%, 34.26%, 34.29%, 34.38%, 34.37%。在 95% 置信度下判断新方法是否有系统误差。

解: 由于总体标准偏差未知, 所以使用 t 检验, 属于双侧检验, 95% 置信度对应 0.05 显著性水平。先计算检验统计量的取值:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sqrt{n} = 0.24$$

然后计算临界值 $-t_{0.025,4}$ 和 $t_{0.025,4}$ 。如图 6a 所示, 选择“Two-sided Test”计算模式, 从 Type 下拉列表中选择 t, 在 Degrees of Freedom 编辑框输入 4; 在 Significance Level 编辑框输入 0.05, 回车或者单击 Calculate 按钮, 软件显示临界值为两个临界值分别是 -2.7764 和 2.7764。检验统计量的取值 0.24 介于两个临界值之间, 所以新方法测定的平均值与标准值没有显著性差异。也可以说新方法测定的

平均值与标准值的差异源自随机因素，所以新方法没有系统误差。根据题中的信息，无法确定该结论的可靠性。

该题也可以通过 P -值完成检验。如图 6b 所示，在软件中选择“CDF <> ICDF”计算模式，从 Type 下拉列表中选择 t，在 Degrees of Freedom 编辑框输入 4；在 Critical Value 编辑框输入检验统计量取值 0.24，回车或者单击 Calculate 按钮，软件显示单侧检验的 P -值为 0.41，所以双侧检验的 P -值为 0.82（将鼠标悬停在 One-sided P-Value 上，提示信息就是双侧检验的 P -值），大于显著性水平 0.05，所以新方法测定的平均值与标准值没有显著性差异。

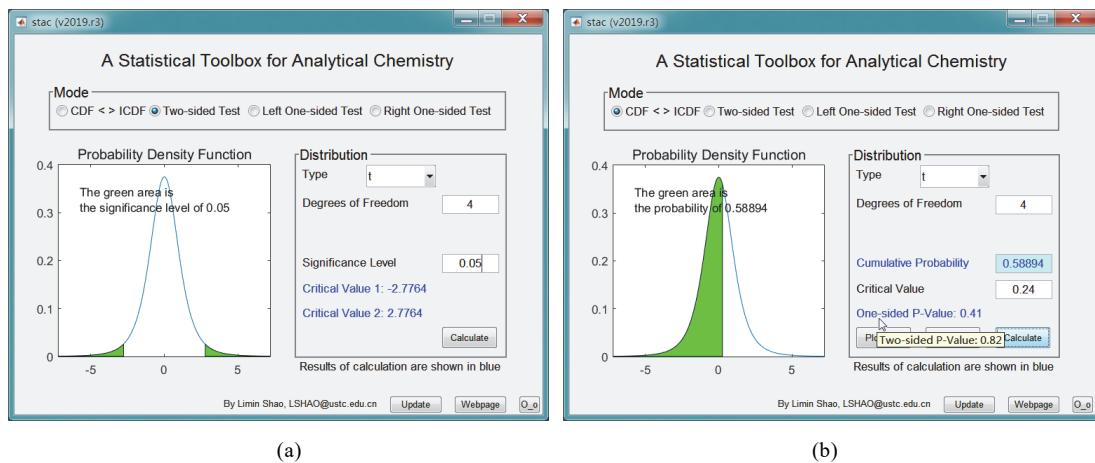


图 6 stac 软件用于 t 检验时两种检验方式的界面

(a) 计算双侧检验的临界值；(b) 计算 P -值

3 结语

开发了面向分析化学教学的数理统计软件，以替代传统的统计数值表。该软件以简洁的界面、直观的图像和自然的人机交互，辅助教学并提高效率，从而将学习重点集中在数理统计知识的深入理解和结果的合理阐释。当前数理统计应用几乎全部通过软件完成，所以本软件也为知识学习到实际应用提供一个较为平稳的过渡。

参 考 文 献

- [1] 武汉大学. 分析化学. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [2] 李龙泉, 朱玉瑞, 金谷, 江万权, 邵利民. 定量化学分析. 第 2 版. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2005.
- [3] 邵利民. 分析化学. 北京: 科学出版社, 2016.
- [4] 华东理工大学, 四川大学. 分析化学. 第 7 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [5] 王运, 胡先文. 无机及分析化学. 第 4 版. 北京: 科学出版社, 2016.
- [6] 胡育筑. 分析化学. 第 4 版. 北京: 科学出版社, 2015.
- [7] 华中师范大学等 6 校合编. 分析化学. 第 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [8] 王玉枝, 张正奇. 分析化学. 第 3 版. 北京: 科学出版社, 2016.